




Automatikspritze kurz (150 mm)

1937V

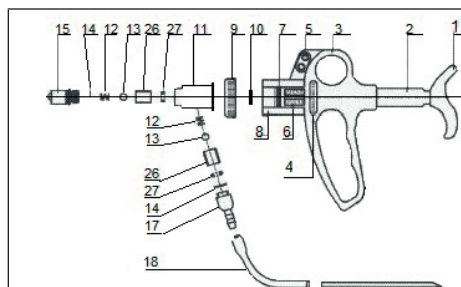

1. Dosiergriff
2. Federhülse
3. Spritzengehäuse
4. Dosierrad
6. Kolben
7. Kolben-Dichtringe O-Ring
8. Pumpzylinder
9. Überwurfmutter
10. Pumpzylinder-Dichtung
11. Düse

12. Ventiltfeder
13. Ventilkugel
14. O-Ring
15. Düsen-Halter
17. Schlauch-Anschluss
18. Schlauch
19. Saugnadel
26. Ventilgehäuse
27. Dichtring O-Ring COD2010

Anleitung & Pflege

Die Dosiermenge (0-5 ml) kann durch Drehen des Dosierrades (4) eingestellt werden.

Für eine gleichmässige Dosiermenge drücken Sie die gesamte Grifflänge (1) während des Spritzvorganges.

Nach jedem Gebrauch muss die Spritze mit Wasser ausgespült werden. Dazu füllen Sie die Flasche mit Wasser und spritzen solange Wasser heraus bis die Spritze vollständig sauber ist. Bitte achten Sie darauf, dass die gesamte Spritze nach Gebrauch vollständig trocknet, um Korrosionen zu vermeiden.


Möchten Sie die mitgelieferten Ersatzteile austauschen, können Sie die Teile gemäss der beige-fügten Zeichnung wieder richtig zusammensetzen.

Bitte beachten Sie alle Sicherheitsvorschriften bei der Anwendung mit Säure.



Seringue automatique (150 mm)

1937V

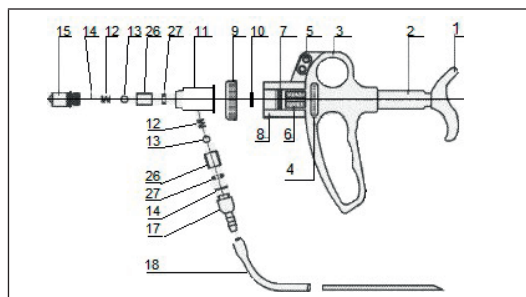

1. Poignée de dosage
2. Cage du ressort
3. Corps
4. Molette de dosage
6. Piston
7. O-ring du piston
8. Cylindre de pompe
9. Ecrou-raccord
10. Joint du cylindre de pompe
11. Buse

12. Ressort de soupape
13. Bille de soupape
14. O-ring
15. Manche pour gicleur
17. Tuyau connecteur
18. Tuyau
19. Aiguille d'aspiration
26. Corps de valve
27. O-ring COD2010

Mode d'emploi et maintenance

Le dosage (0–5 ml) peut être ajusté en tournant la roue de dosage (4). Appuyez sur toute la surface de la poignée (1) pour obtenir un dosage régulier. Lavez la seringue automatique à l'eau après chaque utilisation. Remplissez la bouteille avec de l'eau et giclez l'eau juste qu'à ce que la seringue soit complètement propre. Pour éviter la corrosion, veuillez vider et laisser sécher la seringue après utilisation.

Si vous souhaitez remplacer les pièces de rechange livrées avec ce produit, vous trouverez les informations nécessaires pour l'assemblage sur la figure ci-dessus.

Veuillez respecter les directives de sécurité pour le traitement aux acides.